


1 同軸光

功能：利用指紋與背景在反光（吸光）的差異呈現紋線。

優點：能呈現出更細緻的指紋紋線，也能用來直接拍攝潛伏指紋。

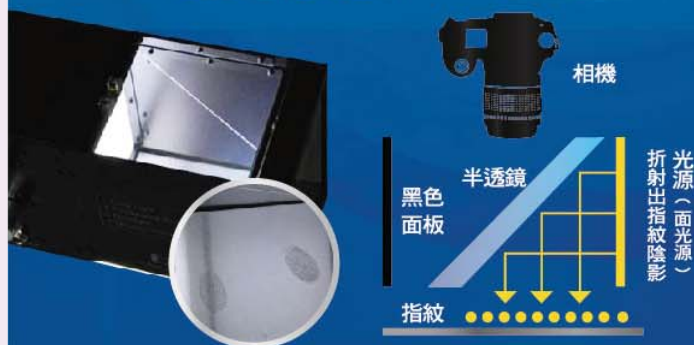

2 螢光檢視（藍光+橘色濾片）

功能：密閉的盒型空間創造出有效的遮光暗房，即使在白天戶外環境，也能作螢光觀測（照相）。


優點：
可用於鑑定鈔票的銀絲線以分辨真偽鈔使用。



3 線形光

功能：利用線形光低角度照明，照亮凸出表面的灰塵及指紋。

優點：可以讓凸出表面上的毛髮、灰塵或指紋一覽無遺。

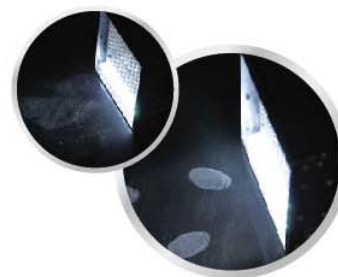

4 面光源

功能：也可固定在三角架上作為現場照明光源。

優點：使用LED手電筒等「點光源」檢視指紋，光點反射的強光常造成視覺不適，長期以來將造成的視力傷害；改用面光源檢視指紋，除了能補足肉眼的不足，更能大幅降低這類傷害。

